



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název školy	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20
IČO	00640824
Číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0134
Název projektu	Moderní škola
Tematická oblast	Zhotovování stomatologických protéz
Název DUM	Oprava – extrahované zuby
Označení DUM	VY_52_INOVACE_ZSP3.27
Autor	Šárka Häuslerová
Anotace	Prezentace slouží k ukázce přidání prefabrikovaných zubů do náhrady.
Metodický pokyn	Prezentace je určena pro 3. ročník oboru Asistent zubního technika. Jedná se o prezentaci zaměřenou na vhodné vybrání prefabrikovaných zubů a jejich správné umístění.
Datum vytvoření	21.3.2013


Oprava-extrahované zuby



- Podlití opravy v otisku. Odléváme jen alabastrovou sádrou




- Po ztuhnutí alabastrové sádry jsme sundali otiskovací lžici a na pracovním modelu nám zůstala oprava.

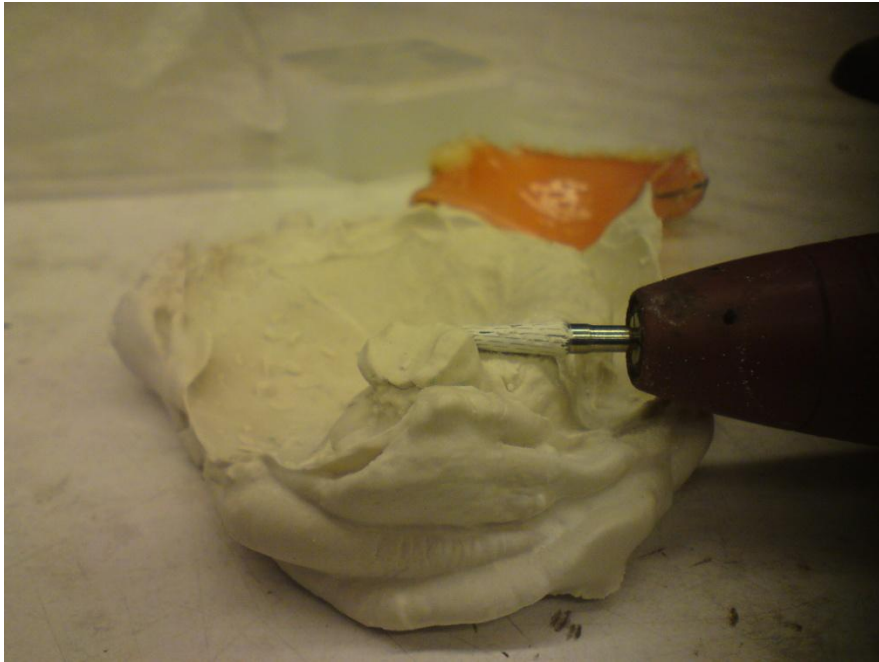

- Opravu jsme sundali z pracovního modelu a zuby, které jsme měli označené od doktora, jsme zbrousili.



- Zbroušené extrahované zuby jsme nahradili prefabrikovanými
- Vybíráme dle barvy a velikosti

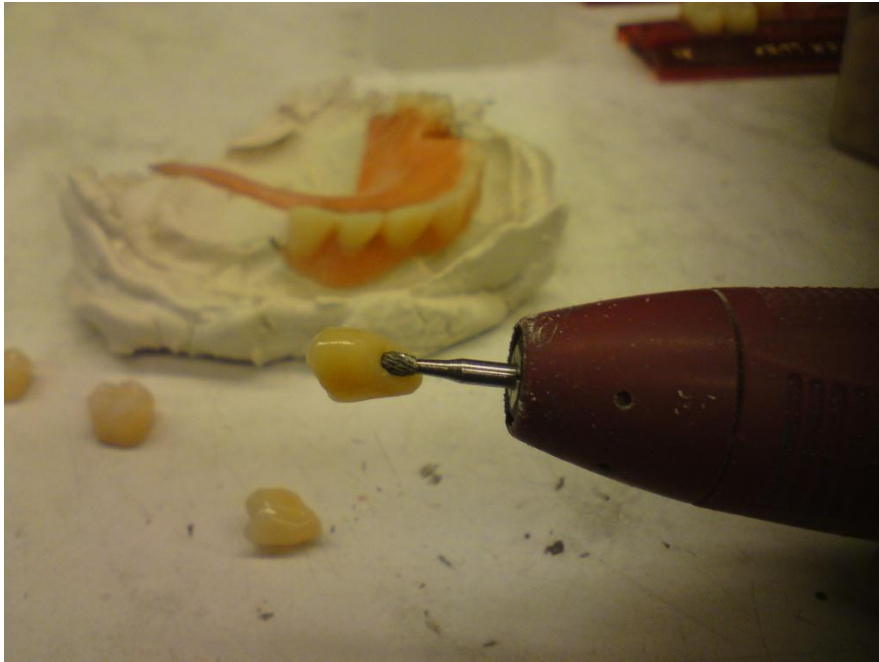

- Prefabrikované zuby jsme si upravili a vybrousili retence. Poté jsme pracovní model izolovali Isodentem.



- Na opravy používáme Premacryl, který jsme si namíchali a nechali odstát. Uzářené těsto jsme dali na opravu, doplnili prefabrikovanými zuby a polymerovali v Ivomatu na 40 -50°C 15minut.

Vyjmutí opravy z Ivomatu a sundání z pracovního modelu





- Opravu po vyndání z Ivomatu jsme obrousili, vyleštili a odevzdali do ordinace.

Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřeby výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zdroje : vlastní tvorba